



SOLUSCOPE SPRINT PT - NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ MYJNI PRZELOTOWEJ

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

 greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.
+48 790 329 925, centrala@greenpol.pl, greenpol.pl

ECOLAB[®]

www.ecolab.com

Soluscope

www.soluscope.com

Soluscope Sprint PT - nowa odłona myjni przelotowych

Automatyczna myjnia endoskopowa zapewniająca wysoką wydajność.


"JEDNOKIERUNKOWA" PROCEDURA ZAPEWNIJĄCA BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA I SKUTECZNOŚĆ REPROCESOWANIA

Rozdzielenie obszaru reprocesowania od strefy czystej uznaje się powszechnie za dobrą praktykę w automatycznych myjniach endoskopowych, pozwalającą zmniejszyć ryzyko skażenia krzyżowego. Myjnia Soluscope Sprint PT pozwala na wdrożenie rozwiązań higieny wysokiego stopnia.

OPTYMALIZACJA NAKŁADU PRACY

Soluscope Sprint PT oferuje szybkie cykle reprocesowania w celu dostosowania pracowni do zwiększającej się liczby badań.

Dzięki innowacyjnej konstrukcji Soluscope Sprint PT utrzymuje barierę fizyczną pomiędzy obszarem reprocesowania, a strefą czystą podczas prac serwisowych. Zapewnia to ciągłość pracy i higieny nawet podczas konserwacji.

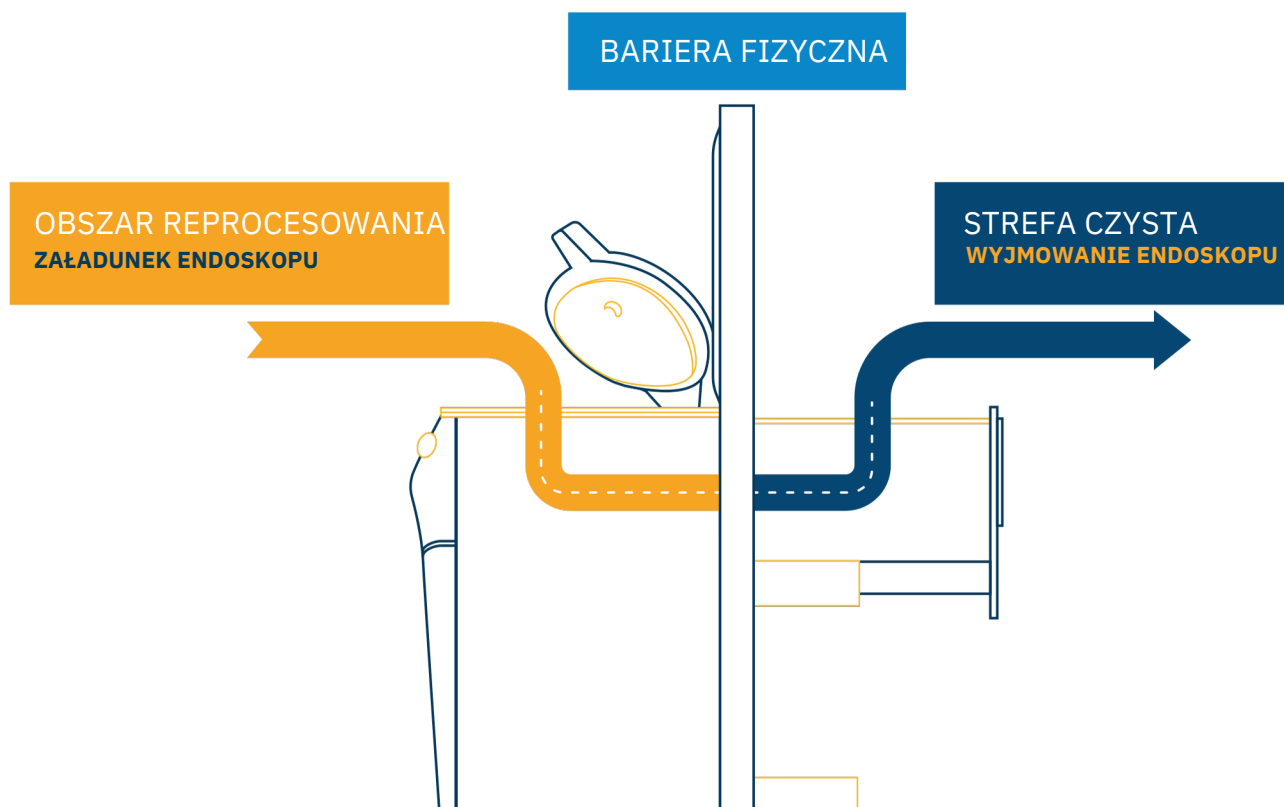

Projekt oparty na doświadczeniach użytkowników

Lepsza kontrola dzięki zaawansowanym, ergonomicznym rozwiązaniom.

INTELIGENTNE, ŁATWE W UŻYCIU INTERFEJSY PRZYSPIESZAJĄCE PROCEDURĘ

Diody LED po stronie czystej na bieżąco informują użytkownika o statusie urządzenia.

Duży ekran dotykowy po stronie reproczesowania zapewnia szybki dostęp do uruchamiania cyklu i konfiguracji parametrów.



ELEKTRONICZNA IDENTYFIKOWALNOŚĆ I ZARZĄDZANIE DANYMI

Soluscope Sprint PT jest wyposażona w czytniki kodów kreskowych po obu stronach, drukarkę i pamięć flash. Jest kompatybilna z systemem EP-Digital, oferującym elektroniczną identyfikowalność, monitorowanie w czasie rzeczywistym ilości endoskopów oraz umożliwiającym ewidencję pobranych próbek mikrobiologicznych i przeprowadzonych prac serwisowych.




PROSTA OBSŁUGA REDUKUJĄCA RYZYKO SKAŻENIA KRZYŻOWEGO

Dedykowane złącza i automatyczna szuflada przelotowa ograniczają manipulacje endoskopem do minimum.



ŁATWY DOSTĘP PODCZAS KONSERWACJI I SERWISOWANIA

Czynności konserwacyjne, wymianę preparatów chemicznych i filtrów przeprowadza się od strony brudnej. Zespół serwisowy ma zdalny dostęp do Soluscope Sprint PT, co umożliwia szybką i łatwą diagnostykę.

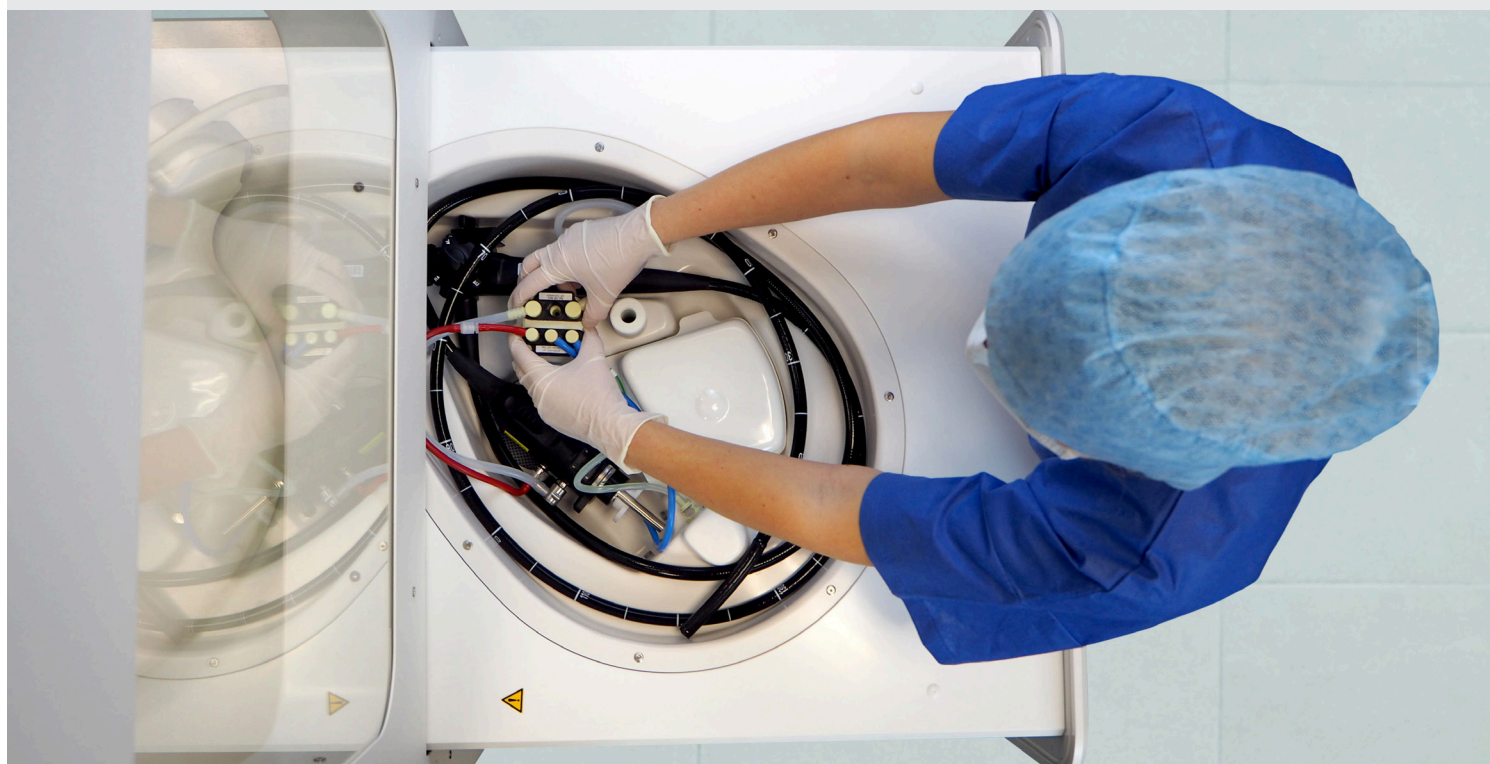

Zapewniona wydajność i bezpieczeństwo pacjenta

Znak CE / zgodność z normą
ISO 15883 - część 1 i 4.

UDOKUMENTOWANE BEZPIECZEŃSTWO

Preparaty chemiczne Soluscope zostały sprawdzone i przetestowane zgodnie z normą EN ISO 15883-4:2018 oraz specjalnie zaprojektowane do stosowania w Soluscope Sprint PT, kompatybilne z szeroką gamą endoskopów giętkich.

ZŁĄCZA

Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami Soluscope złącza są połączone z endoskopem podczas całej drogi reprocessowania, od dezynfekcji do przechowywania.

Takie połączenie powoduje, że zarówno złącza jak i endoskop są na tym samym poziomie higieny oraz zapewnia wydajność i bezpieczeństwo procesu przed użyciem u pacjenta.



SOLUSCOPE P

- Preparat dezynfekcyjny oparty na 5% kwasie nadoctowym
- Optymalne minimalne stężenie efektywne i czas działania 7 minut
- Nie pieni się



SOLUSCOPE A

- Dodatek antykorozyjny do Soluscope P
- Chroni urządzenie i endoskopy



SOLUSCOPE ECL

- Monoenzymatyczny preparat myjący
- Potwierdzona skuteczność w usuwaniu biofilmu i białek

“Ecolab dostarcza kompleksowe rozwiązania do reprocessowania endoskopów giętkich”





OFERTA ECOLAB

Ecolab oferuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie reprocesowania endoskopów giętkich.

Do każdego etapu w cyklu reprocesowania proponuje odpowiednie produkty.

Każdy z tych produktów jest certyfikowany, łatwy w użyciu i wydajny, tak aby zmniejszyć codzienne obciążenie pracą.



greenpol dystrybutor
Instytut Kształtowania Środowiska
Sp. z o.o., +48 790 329 925
centrala@greenpol.pl, greenpol.pl

Zdjęcia poglądowe - Soluscope zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w specyfikacji podanej w niniejszej ulotce bez powiadomienia czy zobowiązania.



SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Dystrybutor:
ECOLAB Sp. z o. o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

ECOLAB®

www.ecolab.com

Soluscope

www.soluscope.com